




## طراح تجهیزات پویا تولید و واردات تجهیزات پزشکی

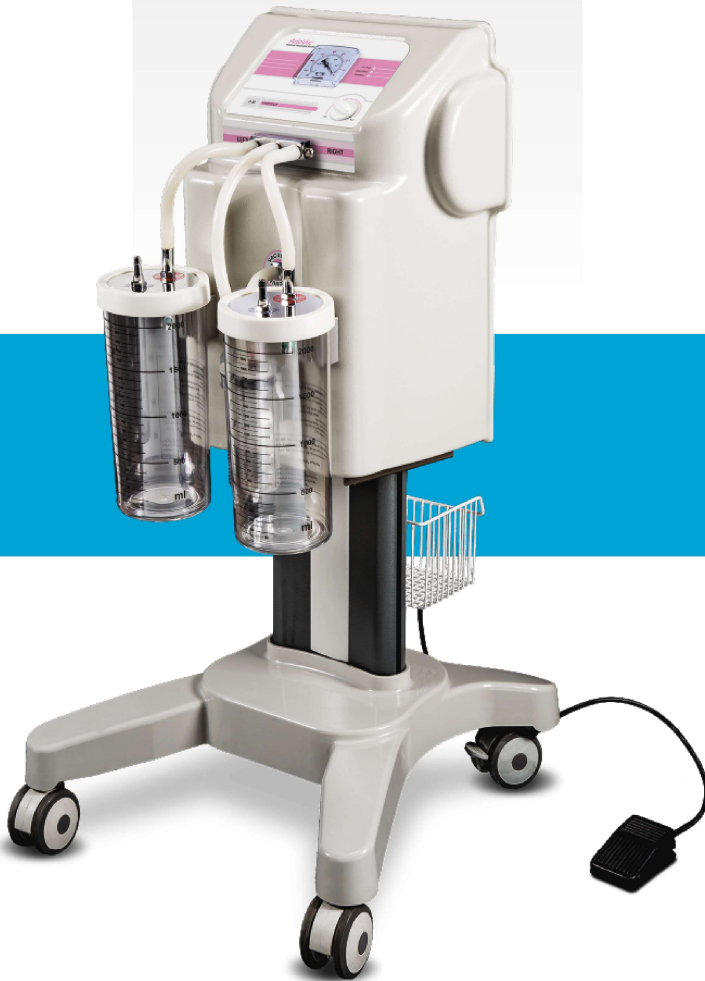

- + دارای سنسور الکتریکی رطوبت سنج با قابلیت خاموش نمودن اتوماتیک موتور به منظور جلوگیری از ورود مایعات به داخل پمپ وکیوم
- + مجهز به آلارم دیداری بر روی صفحه کلید در صورت فعال شدن سنسور الکتریکی رطوبت سنج
- + امکان فعال و غیرفعال نمودن پمپ وکیوم توسط پدال
- + بدنه دستگاه از جنس ABS با امکان شستشوی کامل و ضد عفونی نمودن
- + امکان استفاده از مخزن های یکبار مصرف جهت کنترل عفونت بیمارستانی
- + مجهز به صفحه کلید از جنس پلی کربنات قابل شستشو

- + مجهز به جدیدترین نسل پمپ وکیوم بدون روغن (Oil-Free) دارای حداکثر قدرت وکیوم به میزان ۳۰۰ میلی متر جیوه
- + دارای فیلتر آنتی باکتریال در مسیر ورودی به دستگاه
- + دارای گیج عقربه ای با قابلیت نمایش فشار منفی در دو واحد mmHg و bar
- + دارای دو عدد مخزن ۲ لیتری از جنس پلی کربنات نشکن و قابل اتوکلاو
- + مجهز به سه سلکتور دوطرفه جهت انتخاب مخزن مورد نظر بدون نیاز به جابجایی شلنگ وکیوم
- + مجهز به فلوکنترل بسیار دقیق جهت تنظیم میزان وکیوم
- + حفاظت دستگاه در مقابل ریزش آب (مطابق با استاندارد IPX2)

تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، خیابان هفتم شمالی، پلاک ۱۳

info@pooyeshpaya.com ✉

۰۲۱ ۲۲۹۰۹۱۹۶ ☎



طراح تجهیزات پویا